


ROHO 氣囊式氣墊座(5 公分、7.5 公分)使用 方法

1. 先將坐墊由外層透氣附套內取出
2. 逆時針轉動氣嘴為旋開；順時針為關閉。先將手動充氣幫浦插上充氣閥後再旋開，接著將坐墊氣充飽
3. 充飽氣後將手動幫浦抽離，接著以手按壓氣墊座前方左右兩側各 2X2(5CM)或 2X3(7.5 公分)的氣囊至完全洩氣如下圖所示

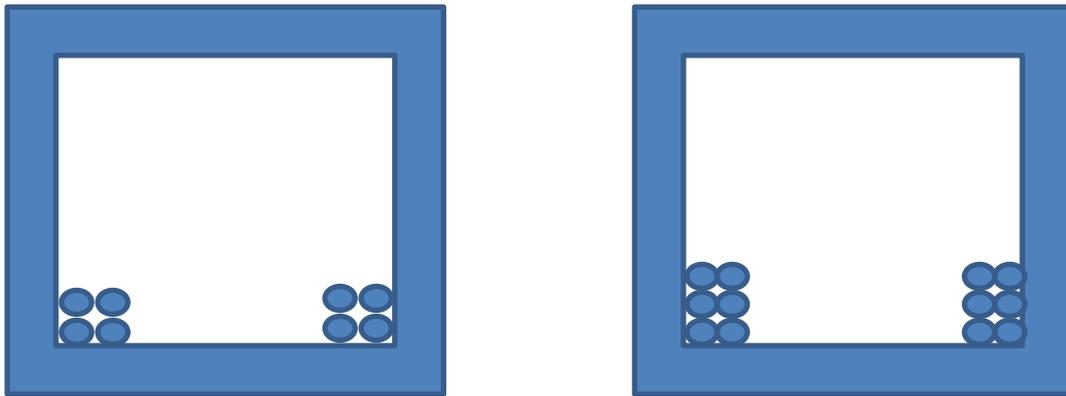

4. 確認該 2X2 或 2X3 雙側氣囊完全洩氣後，將充氣閥旋緊，即完成壓力調整。
5. 此快速壓力調整方法為一般民眾使用方法，請在乘坐後檢查臀部皮膚情形，如有皮膚發紅不退請立即與專業治療師聯繫，以協助調整坐墊至適當壓力